

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΩΝ ΝΙΤΙ EDM



HyFlex EDM – Αλληλουχία ΟΓSF
Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας

 **COLTENE**

HyFlex EDM

Εξαιρετικά ανθεκτικές στη θραύση ρίνες για ασφαλέστερη θεραπεία

Οι ρίνες HyFlex EDM διαθέτουν μοναδική επιφάνεια και ξεχωρίζουν για την ανθεκτικότητά τους και την υψηλή αντοχή τους σε θραύση. Αυτό επιτυγχάνεται με μια καινοτόμο διαδικασία κατασκευής με τη χρήση "Electric Discharge Machining" (EDM - μηχανική κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση). Επιπλέον, οι ρίνες HyFlex κατασκευάζονται από κράμα νικελίου-τιτανίου με θερμική κατεργασία **C**ontrolled **M**emory (CM - ελεγχόμενη μνήμη).

Ο τελείως μοναδικός συνδυασμός ευκαμψίας και αντοχής στη θραύση επιτρέπει τη μείωση του αριθμού των ρινών HyFlex EDM που απαιτούνται για τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση κατά τη διάρκεια των θεραπειών ριζικού σωλήνα χωρίς να διακυβεύεται η διατήρηση της ανατομίας του ριζικού σωλήνα. Όπως και οι ρίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, οι ρίνες HyFlex EDM μπορούν να καμφθούν εκ των προτέρων. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα κρίσιμης σημασίας για ριζικούς σωλήνες με καμπυλώσεις για την αποφυγή της δημιουργίας σκαλοπατιών.

Ασφαλής αναγέννηση πολλές φορές

Η συμπεριφορά επαναφοράς επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο μετά την αποστείρωση σε αυτόκαυστο και επιτρέπει την πολλαπλή χρήση



✓ Ετοιμη για ασφαλή επαναχρησιμοποίηση



✗ Μη συνεστραμμένη (απορρίψτε)

Οι ρίνες NiTi HyFlex EDM έχουν ενσωματωμένη μνήμη σχήματος. Αποφεύγουν την κόπωση κατά τη διάρκεια της παρασκευής αλλάζοντας το σπειροειδές σχήμα τους. Αυτή η αλλαγή μπορεί να αντιστραφεί γρήγορα με την αποστείρωση σε αυτόκαυστο για την επαναφορά των εργαλείων στο αρχικό τους σχήμα και αντοχή στην κόπωση.

Σε περίπτωση που η ρίνη δεν ανακτήσει το σχήμα της μετά τη θέρμανση, τότε παρουσιάζει πλαστική παραμόρφωση, αυξάνοντας τον κίνδυνο θραύσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μετά την οπτική επιθεώρηση.




Προ-αποστειρωμένες

Άμεσα χρησιμοποιήσιμες



Εξαιρετική αντοχή στη θραύση

Ασφαλέστερη θεραπεία χάρη στη μοναδική σκληρυμένη επιφάνεια

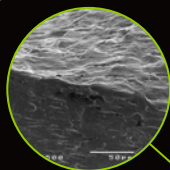

Ισχυρή απόδοση κοπής

Επιτρέπει μικρότερο αριθμό ρινών για γρήγορη παρασκευή



Εξαιρετική ευκαμψία και δυνατότητα κάμψης εκ των προτέρων

Η ομοιόμορφη, κεντραρισμένη παρασκευή μειώνει τον κίνδυνο σχηματισμού βάρους ή διάτρησης χάρη στο φαινόμενο ελεγχόμενης μνήμης



Σχεδιασμός μεταβλητής διατομής

Συμβάλλει στην υψηλή αντοχή σε θραύση



Τριγωνική
διατομή στην
κορυφή



Τραπεζοειδής
διατομή στη
μέση



Τετραγωνική
διατομή στο
άκρο



Αλληλουχία OGSF

Οι νέες ρίνες HyFlex EDM –
Σχεδιασμένες να χρησιμοποιούνται ως αλληλουχία

**Είπατε γρήγορα και με ασφάλεια;
Ανακαλύψτε τη νέα λύση αλληλουχίας!**

Το σύστημα ρινών HyFlex EDM προσφέρει μια εξατομικευμένη λύση για τη γρήγορη και αξιόπιστη παρασκευή τόσο απλών όσο και σύνθετων ανατομιών ριζικών σωλήνων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι εφαρμόζοντας λίστες ελέγχου και ακολουθώντας τυποποιημένες διαδικασίες, αυξάνεται η αναπαραγωγιμότητα και η ασφάλεια. Με βάση αυτή τη γνώση, η COLTENE προσφέρει νέες ρίνες HyFlex EDM σχεδιασμένες να χρησιμοποιούνται ως αλληλουχία με ένα, απλό πρωτόκολλο.

Η νέα αλληλουχία HyFlex EDM OGSF περιλαμβάνει μια νέα ρίνη διάνοιξης στομίου και δημιουργίας διαβατότητας για το άνοιγμα της διαβατότητας, καθώς και μια ρίνη διαμόρφωσης για τη διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα σε όλο το μήκος του. Η καθορισμένη διαδικασία θεραπείας καθιστά την παρασκευή εύκολη και διατηρεί την καμπύλη εκμάθησης σύντομη. Χάρη στη βελτιστοποιημένη αντιστοίχιση των μεγεθών άκρου και των κωνικοτήτων, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τον Καθ. Pedullà, οι ρίνες παρέχουν ομαλή αίσθηση κατά τη μετάβαση από τη μία ρίνη στην άλλη και σας βοηθούν να διατηρείτε τον έλεγχο της θεραπείας.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

- Αποτελεσματική θεραπεία με υψηλή απόδοση κοπής
- Υψηλή αντοχή στη θραύση και ευκαμψία
- Κεντραρισμένη παρασκευή του ριζικού σωλήνα
- Μόνο μία ρίνη διαμόρφωσης
- Αποστειρωμένη καρτέλα
- 2 μήκη: 21 και 25 mm



— Μήκος εργασίας

Πληροφορίες παραγγελιών

Διαμόρφωση

HyFlex EDM OGSF Σετ, 4 τεμ.	21 mm	25 mm	
Αλληλουχία OGSF	60036141	60036142	
HyFlex EDM OGSF Ανταλλακτικά, 3° τεμ.	18 mm	21 mm	25 mm
Εργαλείο διάνοξης στομίου 18/11	60036140	-	-
Ρίνη δημιουργίας διαβατότητας 15/03	-	60023493	60023492
Ρίνη διαμόρφωσης 18/045	-	60036136	60036137
Ρίνη φινιρίσματος 30/04	-	60036138	60036139
HyFlex EDM Ρίνη φινιρίσματος, 3 τεμ.	21 mm	25 mm	
Ρίνη φινιρίσματος 40/04	60022271	60019597	
Ρίνη φινιρίσματος 50/03	60022272	60036598	
Ρίνη φινιρίσματος 60/02	60022274	60036599	

Στέγνωμα και έμφραξη

Μέγεθος / Κωνικότητα	HyFlex EDM Κώνοι χάρτου, 100 τεμ.	HyFlex EDM Κώνοι γουταπέρκας, 60 τεμ.
30/04	60036503	60036504
40/04	60022676	60022708
50/03	60022741	60022709
60/02	60022740	60022710



Opener



Shaper



Glider



Finisher

Ο ενδοδοντικός οδηγός σας Πρακτικότητα. Καινοτομία. Πρωτοπορία.

Η COLTENE παρέχει απλές, ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις για κάθε βήμα της ενδοδοντικής διαδικασίας, καθοδηγώντας προσεκτικά τον οδοντίατρο σε κάθε ενδοδοντική κατάσταση με εξειδικευμένη εκπαίδευση και έμπειρους συμβούλους ενδοδοντίας.

Το χαρτοφυλάκιό μας, το οποίο τελειοποιείται εδώ και δεκαετίες, περιλαμβάνει καινοτόμα αναλώσιμα και εξελιγμένο εξοπλισμό που καλύπτουν αξιόπιστα και τα πέντε βήματα θεραπείας.



Έλεγχος
μολύνσεων



Καθαρισμός και
διαμόρφωση



Διακυσμός και
στέγνωμα



Έμφραξη



Αποκατάσταση

© COLTENE – www.coltene.com

Επωνυμία εκδότη / Εκδότης

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Επικοινωνία πωλήσεων

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
DE-89129 Langenau
+49 7345 805 0
info.de@coltene.com

Κέντρο σέρβις

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Δευτ.-Παρ. 8:00 έως 17:00 CEST

COLTENE